



Simple centrifugation modifiée du liquide céphalo-rachidien pour la détection du trypanosome dans le LCR



I. PRINCIPE

Dans la MSC (Modified simple centrifugation, Miézan et al., 2000) les trypanosomes dans le LCR sont concentrés dans un tube collecteur mAECT, par centrifugation à faible vitesse (3,000 – 3,500 rpm). Après centrifugation, la pointe du tube collecteur est examinée au microscope révélant la présence de trypanosomes mobiles. La technique MSC est un alternatif simple et rapide pour la double centrifugation de LCR.

Références: Miézan T.W., Meda H.A., Doua F., Djè N.N., Lejon V., Büscher P. (2000) Single centrifugation of cerebrospinal fluid in a sealed pasteur pipette for simple, rapid and sensitive detection of trypanosomes. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 94, 293

II. PRECAUTIONS

Les trypanosomes sont fragiles donc le LCR doit être examiné dès que possible, au plus tard 15 minutes après le prélèvement.

Les trypanosomes sont infectieux, donc utiliser des gants en latex lors des manipulations du LCR.

Détruire correctement le matériel à usage unique contaminé.

Nettoyer l'autre matériel avec un liquide désinfectant approprié.

III. MATERIELS & ECHANTILLON


1. MATERIELS FOURNIS DANS LE KIT

Brochure explicative

Tube collecteur en plastique avec bouchon

Pipette graduée en plastic (pipette de transfert)

Tube de centrifugation de 14 ml

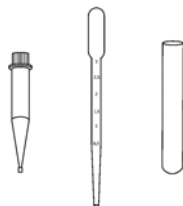

2. MATERIELS SUPPLEMENTAIRES REQUIS

Chambre de lecture mAECT

Microscope avec oculaires 10x ou 15x et objectif 10x

Gants de protection en latex

Container à déchet


Centrifugeuse

3. ECHANTILLON DE LCR A EXAMINER


3,5 ml de LCR fraîchement prélevé

IV. MODE OPERATOIRE


1. Ouvrir le tube collecteur et, à l'aide de la pipette en plastique, transférer 3.5 ml de LCR dans le tube collecteur. Remettre le bouchon pour fermer le tube

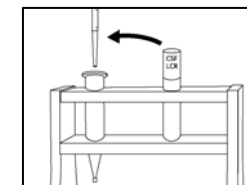


2. Insérer le tube collecteur dans un tube de centrifugation et centrifuger pendant 10 minutes à 3,500 rpm ou pendant 15 minutes à 3,000 rpm.

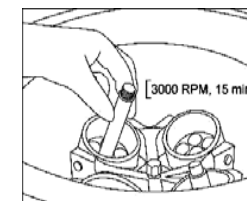

3. Après centrifugation, monter le tube collecteur dans la chambre de lecture sous le microscope avec objectif 10x et oculaires 10x ou 15 x.

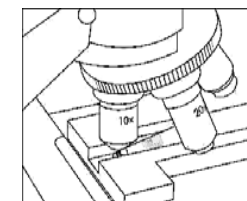

4. Chercher les trypanosomes comme des petits organismes s'agitant dans le fond du tube, parmi les globules blancs. Prendre soin de bien focaliser sur toute l'épaisseur de la pointe du tube.

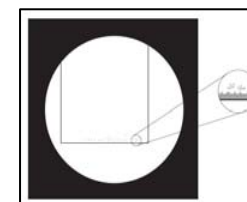

V. DISPONIBILITE

Dr. Dieudonné Mumba

Institut National de Recherche Biomédicale (INRB)

Avenue de la Démocratie, Kinshasa, R.D. Congo

Email: mumbadieudonne@yahoo.fr Tél.: +243 81 81 18 511

CONTACTEZ CETTE PERSONNE AU CAS DE COMPLAINTES